

ProLine Endo Lager- und Trocknungssystem

ProEndo

ProEndo Dry classic



ProLine

Einfach, sicher und komfortabel
ProEndo




Die Lagerung

Alle bekannten Systeme haben den Nachteil, dass die Endoskope am Distalende nicht sauber fixiert sind und somit beschädigt werden können, was wiederum hohe Reparaturkosten zur Folge hat.

Unser Lagersystem für Endoskope „ProEndo“ bietet die Möglichkeit auf einem einzigartigen freischwingenden, vollausziehbaren Teleskopschlitten bis zu vier Endoskope, Bronchoskope oder TEE-Sonden beschädigungsfrei aufzubewahren.

Zur Entnahme der Endoskope wird der Schlitten, auch zweiseitig ausziehbar verfügbar, einfach ausgezogen ohne das dabei ein Anstoßen der Endoskope am Schrankkorpus zu befürchten ist und somit die Entnahme bequem vor dem Schrank erfolgen kann.

Beim Einhängen der Endoskope in das patentierte Lagergestell fixieren sich die Endoskope selbstständig am Schlenkerschutz. Der Schlitten kann dann mit der Sicherheit eingefahren werden, dass beim Schließen der Tür sich das Distalende nicht verklemmt.

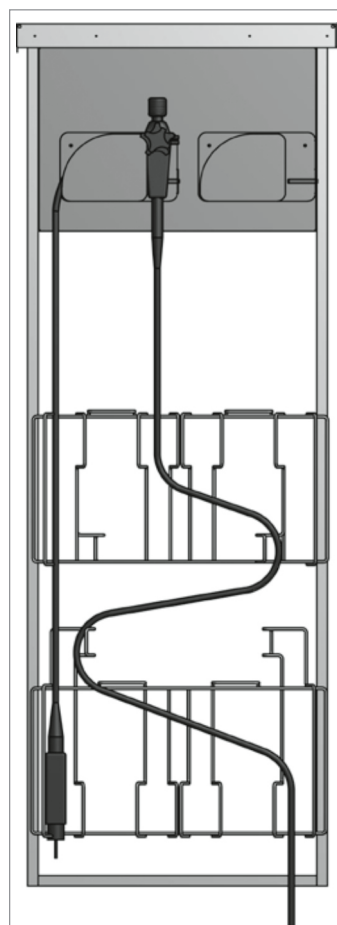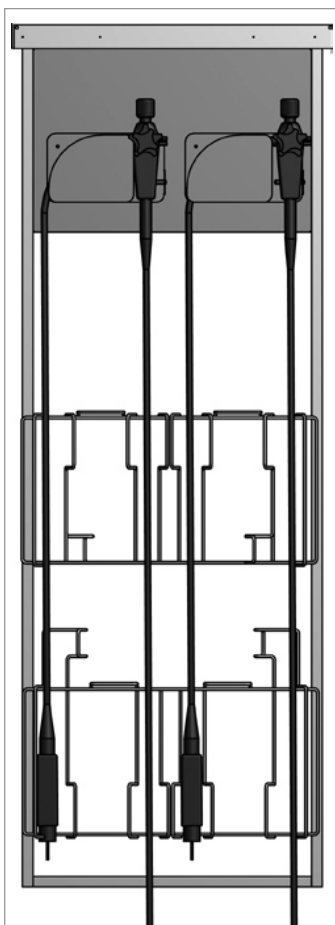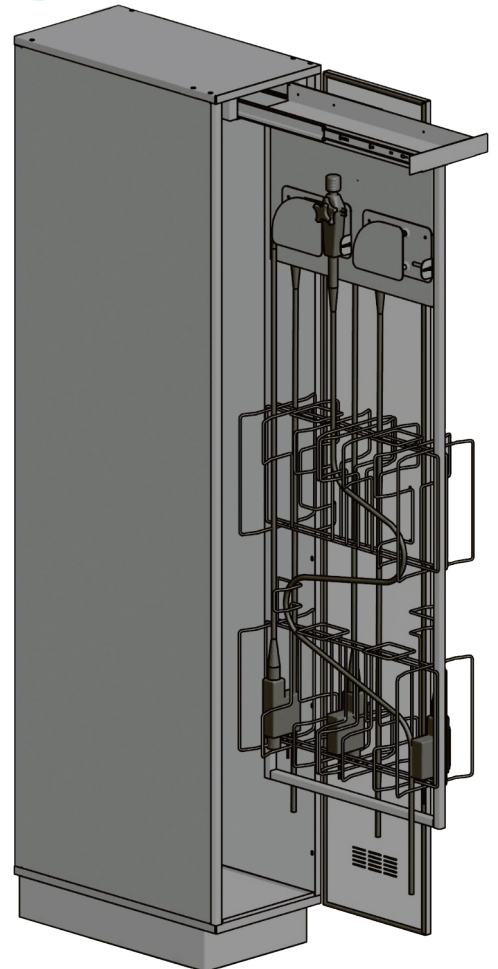

Dies ist nur durch die einzigartige Konstruktion des Schlenkerschutzes möglich. Dieser fixiert das Endoskop freihängend zwischen seinen ergonomisch geformten Bügeln.

Für die beschädigungsfreie Lagerung von langen Distalenden kann der 2 teilige Schlenkerschutz in der Höhe entsprechend angepasst werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der „ProEndo“-Einsatz nur am Schrankdach montiert ist, so dass der gesamte Schrankinnenraum problemlos gereinigt und desinfiziert werden kann.

Der „ProEndo“-Schlitten ist als separates System in jeden Hochschrank ab einem Innenmaß von 260x625 mm (BxT) problemlos montierbar und kann daher auch in bestehenden Hochschränken nachgerüstet werden.

Kapazität/Abmessung (BxTxH)
• Lagerschrank für 4 Geräte: 340x670x2100 mm
• Lagerschrank für 8 Geräte: 600x670x2100 mm
• Lagerschrank für 12 Geräte: 920x670x2100 mm


ProLine







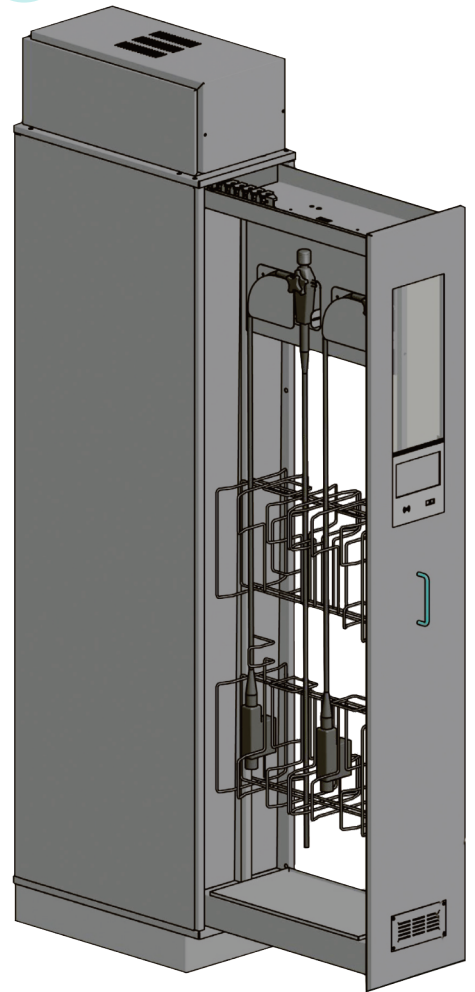


Einfach, sicher und komfortabel
ProEndo Dry classic

Das normkonforme Lagerungssystem mit Trocknungsfunktion für Endoskope einschließlich deren Kanäle

Der **ProEndo Dry classic** schafft geregelte Umgebungsbedingungen mit zusätzlicher Trocknungsfunktion für die Lagerung von Endoskopen

- DIN EN 16442 konform
- bewährter, vollausziehbarer Teleskopschlitten zur hängenden Lagerung der Endoskope
- Lagerung von Endoskopen und Bronchoskopen (herstellerunabhängig)
- Benutzer- und Endoskoperkennung über RFID, Barcode und/oder QR Code Scanner
- Türverriegelung
- 7" Touchscreen hinter gehärtetem Glas
- Statusanzeige
- Eigenlufterzeugung oder Nutzung bauseitig vorhandener medizinischer Druckluft möglich
- Permanenter Kammerüberdruck über separaten, unabhängigen Lüfter
- Durchflussüberwachung je Endoskop über Flowsensor
- H13 gefilterte Luft bei Eigenlufterzeugung
- Aufzeichnung und Speicherung aller relevanten Daten
- optional mit integriertem Drucker
- Modulare Erweiterung für die Lagerung für mehr als 4 Geräten problemlos möglich



 14:44:54 10.01.2018 ←	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00:18:58 (Lagerzeit: 5 Tage) Mehr als 9 Tage </div> <p>Olympus C CF-Q180AL Id: 2907759</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Filterzeit 29 Tage  </div>	 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00:18:58 (Lagerzeit: 5 Tage) Mehr als 9 Tage </div> <p>Pentax G ED 3410 Id: 34117</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Filterzeit 10 Tage  </div>
 Lagerzeit überschritten Olympus G GIF Q160Z Id: 24358 Filterzeit 6 Tage 	 Filterzeit überschritten Olympus B Filterzeit 0 Tage 

ProEndo V1.0.8

Kapazität	max. 4 Endoskope pro Auszug, modular erweiterbar
Technische Daten	230 V, 50 Hz
Trocknung	mit medizinischer Druckluft (max.10 bar) oder Eigenlufterzeugung
Abmessungen (BxTxH)	340 x 670 x 2350 mm

Informieren Sie sich über unser gesamtes Produktportfolio unter
www.lischka.berlin

Alles aus eigenem Haus

- Vertrieb
- Projektentwicklung
- CAD-Konstruktion
- Fertigung
- Montage
- Service



Boxberger Straße 19
12681 Berlin
Germany

Tel. +49 30 98 19 58 - 0
Fax +49 30 98 19 58 - 200

info@lischka.berlin
www.lischka.berlin