

ProWindow Durchgabefenster

ProWindow

sichere Bereichstrennung für höchste Hygieneanforderungen

Die ProWindow Durchgabefenster (mit oder ohne integriertem Lagerschrank) sind die optimale Ausstattungslösung zur klaren und sicheren Trennung zwischen unreinem und reinem Bereich in der AEMP oder Endoskopie. Sie unterstützen strukturierte Arbeitsabläufe und tragen entscheidend zur Einhaltung hygienischer Standards bei. ProWindow ermöglicht die problemlose Übergabe sensibler, manuell aufbereiteter Medizinprodukte sowie Zubehörs in den reinen Bereich. Gleichzeitig bietet das System die notwendige Flexibilität zur Rückgabe von nicht vollständig gereinigten Medizinprodukten vom reinen in den unreinen Bereich. Gefertigt aus hochhygienischem Edelstahl 1.4301, überzeugen die Durchgabefenster durch Langlebigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und ein durchdachtes Hygienesdesign. In Kombination mit dem medizinischen Mobiliar der Serie ProLine entsteht ein harmonisches, funktionales Gesamtkonzept für moderne Aufbereitungseinheiten, das Effizienz, Sicherheit und Qualität vereint.

Manuell **nach oben** zu öffnendes Durchgabefenster *
als Raumtrenneinheit

Durchgabemass **660 x 690** mm (BxH) .

Dieses Durchgabefenster ist auch mit einem pneumatischem Antrieb verfügbar



Manuell **nach oben** zu öffnendes Durchgabefenster * zum Einsetzen in einen Wandausschnitt

(bspw. oberhalb von Tischplatten der unreinen und reinen Seite)

Durchgabemass **660 x 690** mm (BxH).



Manuell **nach unten** zu öffnendes Durchgabefenster *
als Raumtrenneinheit

Durchgabemass **660 x 690** mm (BxH).

Ideal für Raumhöhen unter 2500 mm



*Fenster aus Einscheibensicherheitsglas

ProWindow Durchgabefenster

Manuell **nach oben** zu öffnendes Durchgabefenster ^{*} als Raumtrenneinheit (mit integriertem Lagerschrank und Tischplatte). Durchgabemass **660 x 690** mm (BxH). Dieses Durchreichfenster ist auch mit einem pneumatischem Antrieb verfügbar.




Manuell **nach unten** zu öffnendes Durchgabefenster ^{*} als Raumtrenneinheit mit integriertem Lagerschrank und Tischplatte. Durchgabemass **660 x 690** mm (BxH). Ideal für Raumhöhen unter 2500 mm.



Manuell **nach unten** zu öffnende Durchgabefenster mit 2 Schleusenfenstern und integriertem Lagerschrank als Raumtrenneinheit. Durchgabemass **660 x 690** mm (BxH). Ideal für Raumhöhen unter 2500 mm.



Durchgabeschrank zum Wandeinbau mit oder ohne gegenseitiger elektrischer Verriegelung.

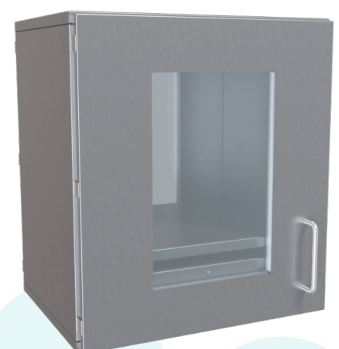

^{*}Fenster aus Einscheibensicherheitsglas

Aus Deutschland in die Welt



Lischka GmbH
Boxberger Straße 19
12681 Berlin Germany
info@lischka.berlin

Tel.: +49 30 98 19 58 - 0
Fax.: +49 30 98 19 58 - 200
web: www.lischka.berlin



2026-01-22_Rev0